

Solutions infrarouge / Téléthèses / Domotique


1- Utiliser votre télécommande infrarouge (Téléthèse) pour piloter les récepteurs de la gamme radio.

Avantages:

- Un prix de reviens très bas.
- Vous utilisez votre télécommande IR existante.
- Vous pouvez piloter tout type de système grâce aux récepteurs radio d'appel malades, sorties contact, récepteurs bip, ou prises 220V.
- La commande passe au travers des murs (radio +/- 50m. en intérieur)
- Vous n'avez pas ou peu de travaux d'installation. (radio)
- Vous programmez votre système par simple apprentissage. (pas de logiciels)

Principe:

- Nous vous fournissons une télécommande de programmation avec tous les codes IR reconnus par notre convertisseur.
- Vous l'utilisez pour injecter les codes IR dans votre téléthèse.
- Programmez 1 code IR par touche de votre téléthèse
- Branchez le convertisseur IR/Radio dans la pièce où vous l'utilisez (Version prise gigogne ou USB)
- Branchez le récepteur radio de votre choix et mettez-le en mode apprentissage.
- Appuyez sur la touche de votre téléthèse qui doit piloter ce récepteur.
- Procédez de même avec chaque sortie ou chaque récepteur que vous souhaitez piloter.
 - Impulsion
 - ON/OFF à 1 ou 2 boutons
 - Activation temporisée.
- Vous pouvez bien sûr utiliser tous les émetteurs radio de la gamme en complément.

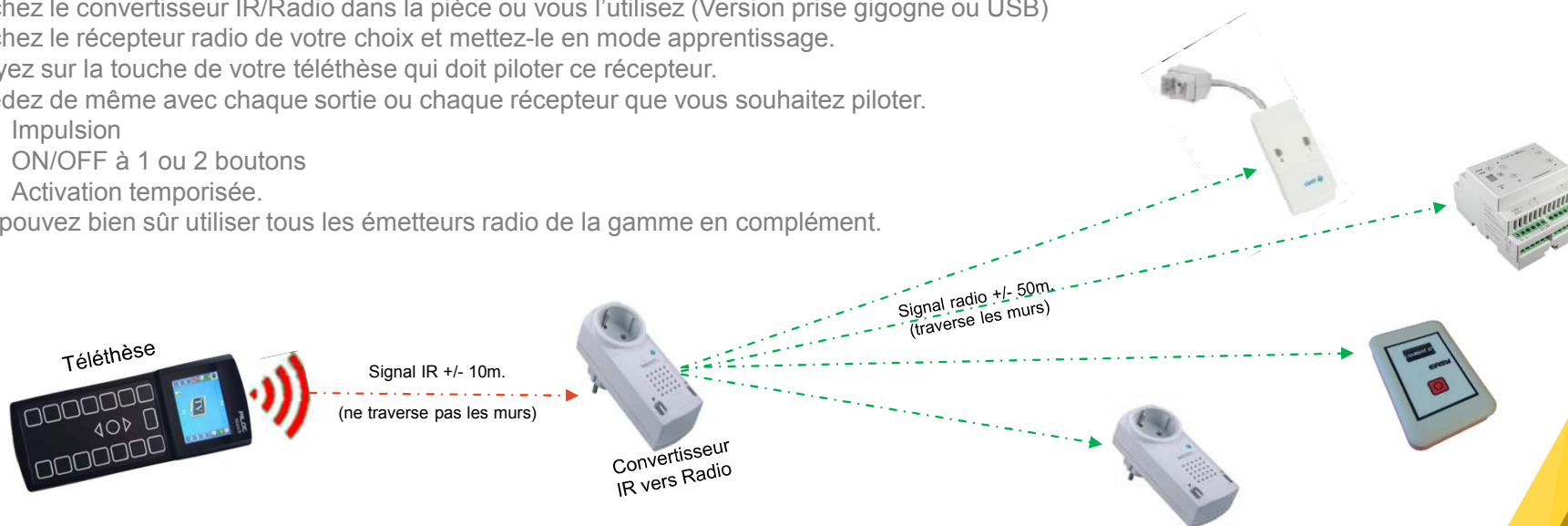

Convertisseurs IR vers radio 868Mhz



ST-IR-TX GIG

Convertit les signaux IR en signaux radio

- Portée IR +/- 10m.
- Portée radio +/- 50m. en intérieur / 150m en champ libre,
- Max 8 commandes transmises
- Max 4 convertisseurs par chambre
- (32 commandes par chambre au maximum)
- Alimentation par la prise 220V



ST-IR-TX USB

Convertit les signaux IR en signaux radio

- Portée IR +/- 10m.
- Portée radio +/- 50m. en intérieur / 150m en champ libre,
- Max 8 commandes transmises
- Max 4 convertisseurs par chambre
- (32 commandes par chambre au maximum)
- Alimentation USB (adaptateur 220V fourni)



ST-IR-PROG

Télécommande de programmation.

- Contient tous les codes IR utilisables.
- Permet l'apprentissage des codes IR sur votre téléthèse.
- Peut être utilisée pour piloter les récepteurs radio via infrarouge.
- 1 seule télécommande nécessaire par site.

Récepteurs radio 868Mhz associés

(Voir catalogue produits radio)

Emetteurs radio complémentaires

Commande d'appel malades



Prises commandées



- Plusieurs versions disponibles:
- Signalisation sonore et lumineuse
 - Commande sortie 220V
 - Sortie contact sec,

Récepteur bip



- Bippeur avec affichage
- Signal sonore et vibrant
 - Accu Li-ION
 - Chargeur fourni

Récepteurs sortie contact



- Plusieurs versions disponibles.
- De 1 à 4 sorties
 - En boîtier
 - Sur rail DIN
 - Sorties paramétrables,



Voir catalogue produits radio

Récepteurs IR autonomes. (réception directe des codes IR)



ST-IR-4SWITCH

Reçoit directement les signaux ir pour activer 4 contacts

- 3 prises jack 3,5 mm mono pour sortie contact à fermeture
- 1 prise jack 3,5 mm stéréo pour contact inverseur NO/NF
- 1 Led d'activation pour chaque sortie.
- Max 4 IR-4SWITCH par chambre (soit 16 commandes)
- Contact maintenu pendant toute la durée du signa IR

- Dimensions: 8 x 6 x 1 cm (USB)
- Alimentation 5V (USB A)
- Commutation max. 30V, 500 mA



ST-IR-PROG

Contient les codes IR pour piloter le IR-4SWITCH

- Permet d'injecter les codes IR dans votre téléthèse,
- 1 seule télécommande nécessaire par site.

ST-IR-controlbox 10 sorties contact programmables

Reçoit les signaux ir pour activer des sorties

10 sorties NO programmables (max 32V AC/DC)

(Sorties max 48V / 500 mA)

Comportement des sorties:

- Impulsion de 0.5 à 127 secondes
- ON/OFF à chaque commande.
- Maintenu le temps de l'émission

•Alimentation de 7 à 32 V DC

•Dimensions: 102 x 54 x 30mm

•Capteur infrarouge intégré

•Possibilité de raccorder un capteur infrarouge externe.

•Raccordement sur fils libres,



ST-MAN-IR

Manipulateur universel avec récepteur IR intégré

Compatible avec 99% des systèmes d'appel malades

Livré avec la fiche appel malades de votre choix.

De 1 à 5 fonctions (Appel, lumières, Volets...)

Voyant de tranquillisation intégré.

Commandé soit par le manipulateur, soit par des commandes infrarouge longue portée.

Une télécommande IR est fournie, permettant l'apprentissage des codes IR dans la téléthèse du patient.

L'alimentation du récepteur IR se fait directement via la fiche appel malades

