

Solutions Anti errance



- **Système performant et simple à mettre en œuvre, qui empêche efficacement des personnes d'errer hors des zones de protection.**
- **Prévient immédiatement le personnel quand les résidents désorientés se déplacent hors des zones protégées.**
- **conçu pour de grands et petits établissements, en particulier avec des issues ayant besoin de contrôle permanent.**
- **Compatible avec tous les systèmes d'appel malades du marché.**
- **La détection déclenche:**
 - **Un signal sonore local (*volume réglable*).**
 - **Une signalisation lumineuse très visible.**
 - **Une sortie contact pour appel malades.**
 - **En option, l'envoi de l'alarme par voie radio.**



STCOM Sarl.
7 rue des Carrières
67170 BRUMATH
info@stcom.fr
03 88 68 31 49
www.stcom-france.com

Unité de porte CRW-FR-LED

- S'installe à la verticale sur le cadre de la porte.
- Détecte immédiatement (moins d'une seconde) quand un résidant équipé d'un bracelet se trouve dans le champ des issues protégées.
- Une sortie permet de verrouiller la porte empêchant la fugue.
- L'alarme ne sera déclenchée que si la porte est ouverte en présence du patient équipé d'un bracelet.
(confirmation par radar, contact de porte ou barrière IR)
- La détection active un buzzer et une série de leds jusqu'à l'acquit de l'alarme.

La version CRW-FR-LED-R permet le renvoi des informations par voie radio vers l'appel malades, des bips, ou sur des afficheurs radio.
Dimensions : 80 x 3 x 2 cm.




Installation sur portail

Installation sur porte extérieure

Installation sans fils sur panneau solaire



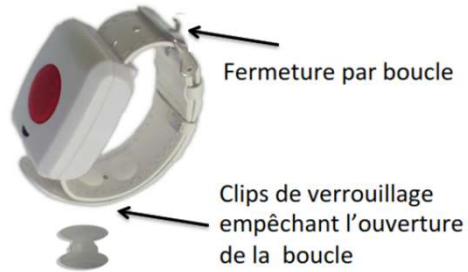

Bracelet CRW-FR-BM

- Petit, léger et étanche à l'immersion
- 19 grammes
- Bracelet verrouillé par clip inamovible.
- Autonomie environ 1 an,
- Pile CR2744 remplaçable
- Programmation N° de chambre par badge magnétique.
- Mise en et hors service par badge magnétique permettant un stockage de 10 ans.

Testeur portatif CRW-FR-TEST

- Petit et léger, sur pile 9 V, standard.
- Permet de :
 - Tester l'état des piles des bracelets à +/- 3 mètres.
 - (Indique le N° du tag et l'état de sa pile)
 - Acquitter une porte en alarme
 - Laisser passer une porte sans déclencher l'alarme
 - Affiche le N° du bracelet qui a déclenché une alarme



Badge « laisser passer » CRX-FR-LP

- Petit, léger et étanche à l'immersion
- 19 grammes
- Permet de:
 - Inhiber une porte pendant 20 sec. (passer sans alarme)
 - Acquitter une alarme
- Utilisé par le personnel soignant
- Utilisé pour les familles pour autoriser les sorties.



Clavier d'acquit et laisser passer ACQ-41H

- Posé au niveau de la porte.
- Permet de:
 - Inhiber une porte pendant 20 sec. (passer sans alarme)
 - Acquitter une alarme
- Utilisé par le personnel soignant
- Utilisé pour les familles pour autoriser les sorties.

