

Version : ST-PROX-500 (Activation par proximité +/- 2cm)

- Déclenchement de l'appel par capteur IR
- Distance de détection +/- 2 cm sans contact physique
- Nécessite une mobilité supérieure à 2cm.

Version : ST-SOFT-500 (Activation par contact de la peau)

- Déclenchement par effleurement sans force.
- Déclenche au contact avec la peau (pas au contact de tissus ou autres...)

Caractéristiques communes aux 2 versions

- Bras articulé léger en rotules ABS de 10 à 60 cm (sur mesure)
- Signal voyant à l'activation (tranquillisation)
- Voyant de localisation nocturne permanent.
- Diamètre bras et capteur 22 mm.
- Pince étau en ABS, robuste pour tube ou surface plane jusqu'à 55 mm
- Fixation rapide, facile à déplacer, sur barrière de lit, fauteuil, chevet ...

Options:

- Signal sonore et voyant à l'activation (tranquillisation)
- Fiche appel malades au choix.
- *S'il n'y a pas de tension disponible sur la prise appel malades, prévoir un bloc secteur.
(* à prévoir également en usage sur fiche jack)



Caractéristiques ST-PROX-1000


- **Pas de contact physique, (détection de proximité)**
 - Contact à ouverture ou fermeture.
 - Détection réglable de 20 à 100 mm,
 - Mode bistable, impulsion ou temporisé réglables,
 - Alimenté par la fiche appel malades existante (*toutes marques)
 - Alimenté par bloc secteur fourni s'il n'y a pas de tension disponible sur la prise existante.
 - Adaptation fiche appel malades (voir rubrique adaptateurs)
- **Bras col de cygne en acier 1 mètre.**
- **Fixation en tête de lit (*libère l'accès aux soins*).**
- **Permet la bascule sans démontage du lit vers le fauteuil.**
 - Capteur diam, 63 mm. X 32 mm.
 - Voyant de localisation nocturne.
 - Signal sonore à l'activation.
 - Voyant rouge piloté par l'appel malades (*allumé jusqu'à acquit*)
 - Pince étau en aluminium, robuste pour tube ou surface plane jusqu'à 50 mm.

OPTION BRAS PREMIUM (Voir descriptif ST-BRAS-PREMIUM)

- **Col de cygne creux** permettant un passage de câble discret et une désinfection optimale.
- Cordon protégé augmentant le durabilité.
- **Rotule 360°** permettant d'optimiser au maximum la position du contacteur.



Voyants de fonctionnement et de localisation nocturne

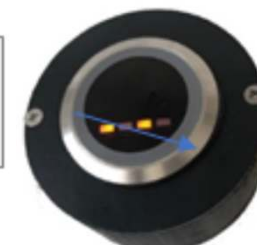

Buzzer à l'activation
Voyant rouge piloté par l'appel malades



Pince étau 50 mm.
Fonte d'aluminium
Tube ou plat avec cale



Caractéristiques générales du capteur

- **Déclenchement par effleurement sans force**
- **Ne réagit qu'au contact de la peau (Pas les draps, les tissus, ou autres...)**
- Alimenté par la fiche appel malades existante (*toutes marques)
- Voyant de localisation nocturne permanent
- Change de couleur à l'activation.
- Sortie NO ou NF au choix (préciser)
- Fiche de sortie au choix

Options:

- Signal sonore et voyant à l'activation (tranquillisation)
- Fiche appel malades au choix.
- *S'il n'y a pas de tension disponible sur la prise appel malades, prévoir un bloc secteur.
(* à prévoir également en usage sur fiche jack)

2 Versions:

- **ST-SOFT-MAN** Poignée simple (sans système de maintien).
- **ST-SOFT-STRAP** Poignée avec sangle velcro réglable de maintien rotative
 - La sangle velcro maintient une platine rotative
 - La position est verrouillable par loquet
 - Activation par le pouce ou un autre doigt.



Loquet de blocage
De rotation

Voyant de Localisation
(Change de couleur à l'activation)

